

13. Legen Sie sterile Kompressen auf.



14. Kleben Sie das Klebevlies über die Kompressen. Drücken Sie dabei Ihren Bauch nach außen. Dadurch vermeiden Sie eine Reizung der Haut durch Dehnung des Pflasters.



Kontakt

Kontakt

T: 0941 944-17640
Station 12
Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie
Universitätsklinikum Regensburg

Im Notfall

Notruf	112
Ärztl. Bereitschaftsdienst	116 117
Notaufnahme UKR	0941 944-2310

Ihr Homecare

Universitätsklinikum Regensburg
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93053 Regensburg

Foto: UKR/Referat UK4 Fotografie
Stand: November 2020

SPITZE IN DER MEDIZIN.
MENSCHLICH IN DER BEGEGNUNG.



Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie

VERBANDWECHSEL BEI ERNÄHRUNGSSONDE

Informationen für Patienten und Angehörige

Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Angehörige,

damit Sie den Verbandwechsel zu Hause selbst erledigen können, erklären wir Ihnen in diesem Flyer den Ablauf Schritt für Schritt.

Sie müssen den Verband normalerweise **alle zwei Tage** wechseln. Bei Verschmutzung oder Nässe jedoch sofort.

Sollten Sie eine Rötung der Einstichstelle feststellen oder Schmerzen haben, informieren Sie bitte unmittelbar Ihren Hausarzt.

Die Ernährungssonde muss einmal täglich mit 50 ml abgekochtem, erkaltetem Wasser gespült werden.

Wir wünschen Ihnen für Ihre Genesung alles Gute!
Ihr Team der Station 12

1. Waschen Sie sich die Hände gründlich mit Seife.
2. Bereiten Sie das neue Verbandmaterial griffbereit vor.



3. Entfernen Sie vorsichtig den alten Verband.
4. Lösen Sie die Halteplatte.
5. Wischen Sie mit Desinfektionsmittel getränkten Kompressen die Einstichstelle im Halbkreis mit etwas Druck in einem Zug.


6. Wiederholen Sie das auch an der anderen Seite der Einstichstelle.
7. Wischen Sie mit einer neuen Desinfektionsmittel getränkten Kompressen den Ernährungsschlauch ab. Sie beginnen an der Einstichstelle und enden an der weißen Klemme. Wischen Sie immer vom Bauch weg.



8. Wenn die weiße Halteplatte verschmutzt ist, reinigen Sie sie desinfizierend.
9. Zum Mobilisieren der Ernährungssonde drehen Sie den Schlauch.
10. Das Desinfektionsmittel auf der Haut (ca. 30 Sek.) trocknen lassen.

Beachten Sie, dass die Ernährungssonde bis zu einem leicht merklichen Widerstand vorsichtig angezogen ist und auch so verbunden wird.

11. Legen Sie die Schlitzkompressen auf die Einstichstelle und fädeln Sie die Ernährungssonde in den Schlitz ein.

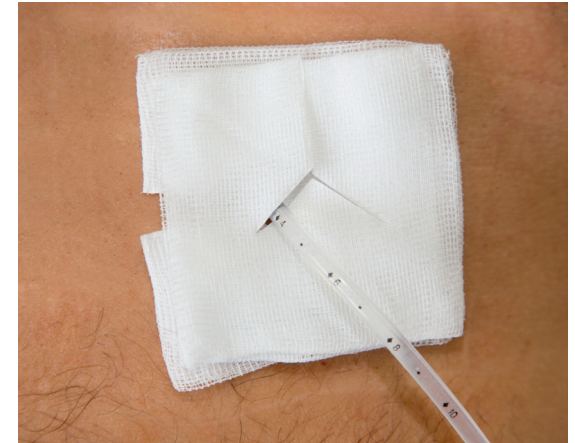

12. Ziehen Sie die Halteplatte bis zu den Schlitzkompressen heran. Klemmen Sie dabei die Ernährungssonde zwischen die zwei Gummihalteungen auf der Halteplatte ein. Ziehen Sie den Schlauch bis zum Widerstand vorsichtig heraus. Befestigen Sie die blaue Klemme der Halteplatte um den Schlauch.

